

POSITIONIERUNGSHILFEN MIT POLYSTYROLKÜGELCHEN ODER POLYESTER-FASER

POSITIONSUNTERSTÜTZUNGSKISSEN MIT POLYSTYROL MIT GERINGEM KALIBER ODER HOHLFASERFÜLLUNG

MATERIALIEN



Polystyrol-Kügelchen mit geringem Kaliber



Polyester-Faser



Abnehmbarer Polymaille® Integralbezug

Reinigung des Kerns:



Reinigung Bezug:



HMV

Ein Teil der hier angegebenen Produkte ist im HMV unter Nr.
11.11.05.0019 (P9700B)
11.11.05.0019 (P9701B)
11.11.05.1018 (P9702B)
11.11.05.1018 (P9703B)
11.11.05.0019 (P9704B)
11.11.05.1017 (P9705B)
11.11.05.2003 (P9707B)
11.11.05.1017 (P9708B) gelistet:
<https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de>

POSITIONIERUNGSHILFEN MIT POLYSTYROLKÜGELCHEN


→ Sehr leichtes Material: Polystyrol-Kügelchen mit geringem Kaliber für einen erhöhten Komfort und eine große Anpassbarkeit des Hilfsmittels an die Morphologie des Patienten.

→ Für eine erhöhte Feuer-Resistenz, sind die Mikrokügelchen chemisch behandelt.



POLYESTER-FASER

→ Hohe Reißfestigkeit und Formbeständigkeit
→ Hohe Bauschraft und Seidenweich
→ Schwer entflammbar

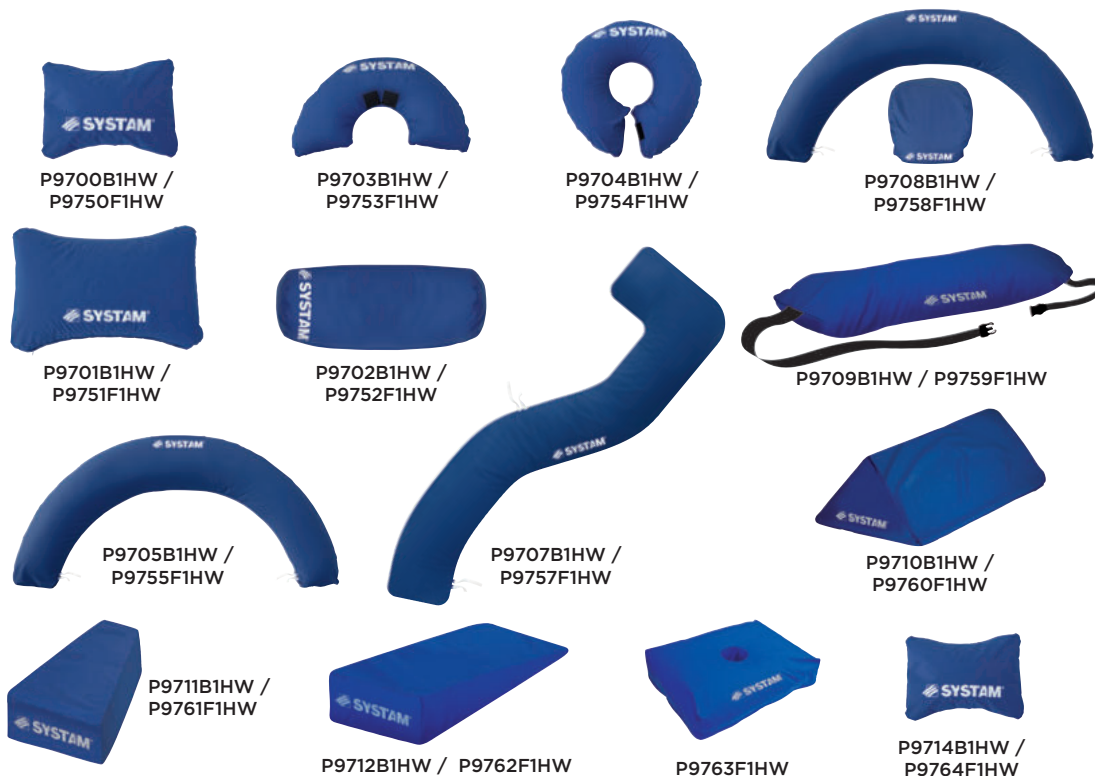

BEZUGSEIGENSCHAFTEN

POLYMAILLE® BEZUG FLÜSSIGKEITSABWEISEND UND ATMUNGSAKTIV

- Beschichtung von Jersey-Polyester (antibakteriell, antimikrobiell, antifungizid behandelt) mit antiallergenem Polyurethan.
- POLYMAILLE® ist sehr dehnfähig, um Scher- und Reibungskräfte zu bekämpfen;
- POLYMAILLE® ist atmungsaktiv zur Begünstigung des Mikroklimas;
- POLYMAILLE® ist vollkommen flüssigkeitsabweisend.
- Waschbar bis 95°C. Desinfizieren mit kalt zu versprühenden Produkten. Reinigen mit Seifenwasser.
- Entspricht den geltenden Vorschriften.



DIESE HILFSMITTEL WERDEN STANDARDMÄSSIG MIT 2 BEZÜGEN, DAVON EINER ABZIEHBAR, GELIEFERT

- Einfache Reinigung
- Bessere Hygiene
- Erhöhte Haltbarkeit
- Zum Wiedereinsatz angepaßt.

BEZEICHNUNG	PRODUKT-NR POLYSTYROL KÜGELCHEN	PRODUKT-NR POLYESTER MIKROFIBER	GRÖßEN (L x W x H)
Universalkissen Small	P9700B1HW	P9750F1HW	45 x 30 cm
Universalkissen Standard	P9701B1HW	P9751F1HW	56 x 40 cm
Zylinderkissen	P9702B1HW	P9752F1HW	Ø 20 x 60 cm
Spreizkissen	P9703B1HW	P9753F1HW	62 x 32 cm
Ringkissen	P9704B1HW	P9754F1HW	50 x 50 cm
Halbmondkissen	P9705B1HW	P9755F1HW	135 x 85 cm
Rückenstützkissen für das Halbmondkissen	P9706B1HW	P9756F1HW	58 x 40 cm
Seitenlagerungskissen	P9707B1HW	P9757F1HW	180 x 54 cm
Halbmondkissen mit Rückenstützkissen	P9708B1HW	P9758F1HW	135 x 85 cm 40 x 58 cm
Fersenstützen mit einem einstellbaren Gurt	P9709B1HW	P9759F1HW	85 x 25 x 15 cm
Delta-Kissen	P9710B1HW	P9760F1HW	60 x 40 x 30 cm
Abduktionskissen	P9711B1HW	P9761F1HW	30 x 10-30 x 15 cm
Lagerungskissen mit Neigung	P9712B1HW	P9762F1HW	46 x 30 x 15 cm
Kopf-Lagerungssystem	-	P9763F1HW	48 x 43 x 10 cm
Universalkissen Extra-Small	P9714B1HW	P9764F1HW	30 x 20 cm
Tragetasche	PKDEMOSACO1		90 x 80 x 30 cm
Kompletes Set mit Tragetasche	PKDEMOPOSB01	PKDEMOPOSF01	




Gewährleistung



UNIVERSALKISSEN SMALL & STANDARD

(Produkt-NR: P9700B / P9750F und P9701B / P9751F)

- Das ist das universelle Lagerungshilfsmittel schlechthin: Als Hilfsmittel zur Positionierung des Patienten, zur Druckentlastung der Fersen, als Schutz der Innenseiten der Knie und der Fußgelenke, als Kopfkissen...
- Einzeln oder in Verbindung mit anderen Positionierungshilfen verwendbar.
- In zwei Größen erhältlich: Small und Standard.

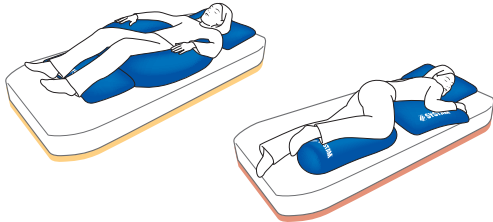

P9700B / P9750F



P9714B / P9764F



P9701B / P9751F

SPREIZKISSEN (Produkt-NR: P9703B / P9753F)


- Die gemeinsame Anwendung der Kissen P9702/P9752F und P9703/P9753F gewährleistet eine komfortable Positionierung des Patienten in den Positionen Semi-Fowler (Rücken und Becken in 30°) und Dorsal-Dekubitus durch eine stabile Abstützung des Beckens und der Abduktionsbereiche dank des Spreizkissens P9703B/P9753F.
- Druckverringering im Bereich der inneren Knöchel und der Innenseiten der Knie.




P9703B /
P9753F

ZYLINDERKISSEN (Produkt-NR: P9702B / P9752F)

- Unter den Knien platziert, reduziert es die Lendenvertiefung.
- In Verbindung mit dem Spreizkissen (P9703B/P9753F) gewährleistet es eine stabile Abstützung der Abduktionsbereiche und schützt gleichzeitig die Innenseiten der Knie.

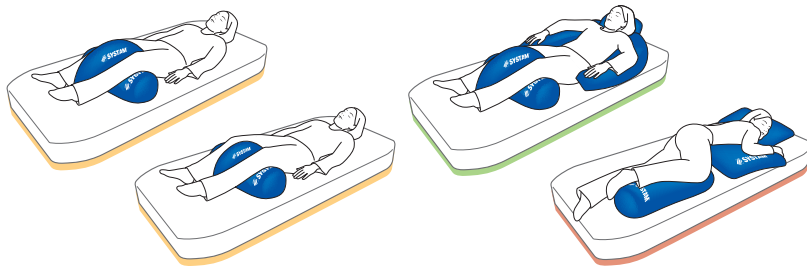


P9702B / P9752F

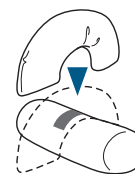

**BEFESTIGUNGSSYSTEM
DURCH KLETT-BAND**
→ Einfach and Wirksam.

RINGKISSEN (Produkt-NR: P9704B / P9754F)

- Ermöglicht eine komfortable Abstützung des Nackens in den Positionen: Dorsal-Dekubitus und Semi-Fowler.
- Einfache Fixierung durch Klettband.

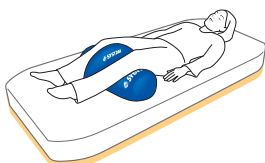


P9704B / P9754F

P9705B /
P9755F




P9706B / P9756F

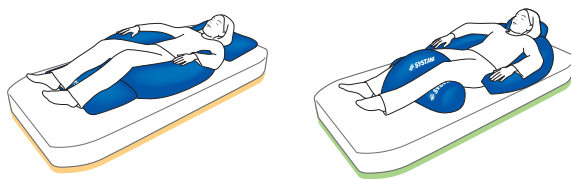


HALBMONDKISSEN ZUSÄTZLICHE RÜCKENSTÜTZE FÜR DAS HALBMONDKISSEN

(Produkt-NR: P9705B / P9755F und P9706B / P9756F)

- Gewährleistet die Abstützung des Oberkörpers und des Beckens des Patienten in den Positionen Dorsal-Dekubitus und Semi-Fowler. Verringert den Auflagedruck im Bereich der Ellenbogen. Kann im Rollstuhl angewendet werden. Ausgestattet mit einem Befestigungsstreifen für die Rückenstütze (P9706) für eine komfortable Positionierung des Patienten.
- Exklusivität SYST'AM®: Ausgestattet mit dem System EasyShape® welches eine an die Morphologie des Patienten angepasste Positionierung festlegt und aufrechterhält.

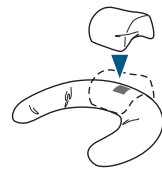


**BEFESTIGUNGSSYSTEM
DURCH KLETT-BAND**
→ Einfach and Wirksam.

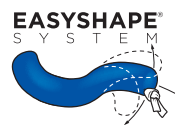


SEITENLAGERUNGSKISSEN (Produkt-NR: P9707B / P9757F)

- Ausgestattet mit einem integrierten Kopfkissen für einen optimalen Komfort.
- Gewährleistet einen Positionierungskomfort der Knie, des Beckens und des Oberkörpers in Seitenlagerung.
- Exklusivität SYST'AM®: Ausgestattet mit dem System EasyShape® welches eine an die Morphologie des Patienten angepasste Positionierung festlegt und aufrechterhält.
- Eine einzige Standardgröße kompatibel für alle Patientengrößen.

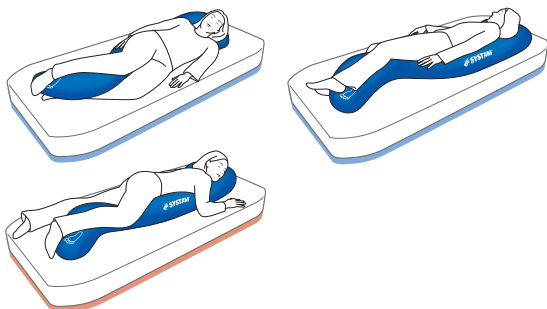






P9707B / P9757F

**EASYSHAPE®
SYSTEM**

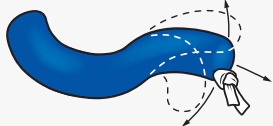


EASYSHAPE® : DAS SYSTEM SYST'AM®

- Die eingnähten Schnürsenkel des Halbmondkissens (P9705B/P9755F) und des Seitenlagerungskissens (P9707B/P9757F) erlauben es, eine an die Morphologie des Patienten angepasste Positionierung festzulegen und auf Dauer aufrechtzuerhalten. Hierdurch verbessert sich der Komfort für den Patienten und optimiert sich die ergonomische Form des Hilfsmittels.
- Es genügt die Schnürsenkel zu spannen um die Biegung des Hilfsmittels zu verstärken und sie zu verknoten um die gewünschte Positionierung auf Dauer aufrechtzuerhalten.
- Das System EasyShape® einfach und wirkungsvoll, ermöglicht eine an die Morphologie des Patienten angepasste Positionierung festzulegen und auf Dauer aufrechtzuerhalten.

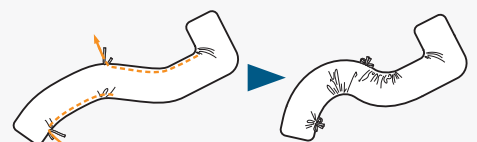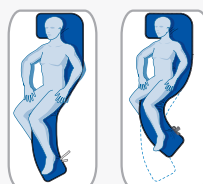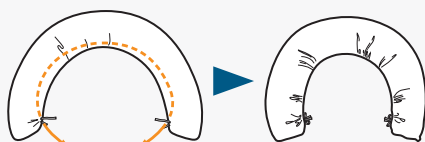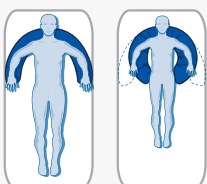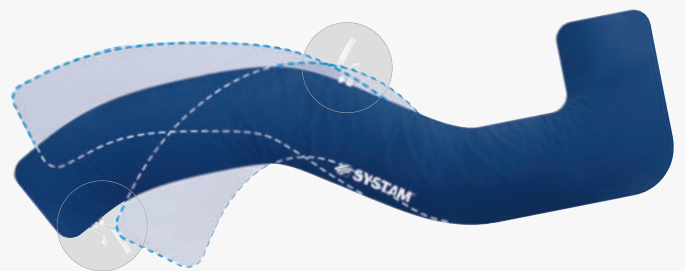

P9709B / P9759F

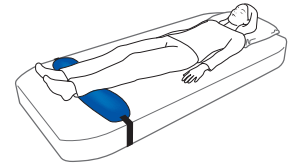


FERSENSTÜTZEN MIT EINEM EINSTELLBAREN GURT
(Produkt-NR: P9709B / P9759F)

- Ermöglicht das Kniegelenke-Stützen und die Fersen-Vollentlastung.
- Einstellbarer Gurt um die Matratze.

DELTA-KISSEN (Produkt-NR: P9710B / P9760F)


- Lagerungskissen für die halbe Fowler-Position.

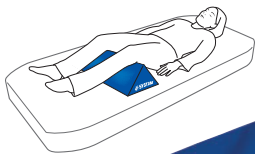

P9710B / P9760F

ABDUKTIONSKISSEN (Produkt-NR: P9711B / P9761F)

- Ermöglicht die Hüftabduktion. Verringerung der Reibungs- und der Scherkräfte auf die unteren Gliedmaßen.

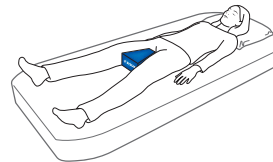

P9711B / P9761F




LAGERUNGSKISSEN MIT NEIGUNG (Produkt-NR: P9712B / P9762F)

- Ermöglicht eine geneigte Lagerung der oberen / unteren Gliedmassen.



P9712B / P9762F

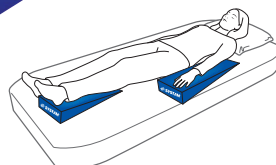


KOPF-LAGERUNGSSYSTEM (Produkt-NR: P9763F)

- Druckentlastung des Kopfbereiches.



P9763F

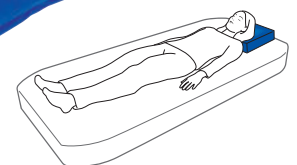

TRANSPORTSACK
→ mit Documentasche DIN A4.

